



A FITA DUPLA FACE  
MAIS FINA MELHORA  
A FIXAÇÃO DO TUBO E  
TRAZ MAIS CONFORTO  
À FACE DO PACIENTE

MAIS  
ANATÔMICO



O **MEDFIX® ORO** Velcro Adulto tem a finalidade de garantir a adequada fixação de tubos endotraqueais evitando a extubação do paciente, com conforto, praticidade e segurança. O Novo projeto tem regulagem através do velcro para proporcionar ao profissional que o estiver aplicando uma ajustagem fina no entorno do paciente para uma perfeita e segura fixação e estabilização do tubo orotraqueal.

Sendo então, composto de Tecido não tecido laminado de Polipropileno, Fita dupla face com liner de papel glassine pardo (120 g/m<sup>2</sup>), dorso de espuma de Polietileno e adesivo borracha em uma face e acrílico Hipoalergênico na outra, Fita dupla face com duplo liner de papel glassine branco (60 g/m<sup>2</sup>), dorso de filme de polipropileno e adesivo acrílico em ambos os lados, Velcro de polipropileno ajustável, para fixação da cânula orotraqueal, lacrado de forma inviolável contendo 01 unidade.

Comercializado no tamanho Grande: Ref.: 102-040

Patente Requerida: MU 8601030-1

BR 102014 0175393

Registro MS/ANVISA: 80327110002

## POR QUE MUDOU?

### Por que todos os componentes são de uso medicinal?


Com o passar dos anos novas matérias primas foram lançadas no mercado mundial, novos protocolos médicos adotados e algumas matérias primas até então aceitas para uso no ramo medicinal, hoje, tiveram seu uso restrito/proibido pelas autoridades sanitárias. Desenvolvemos o fixador de cânula orotraqueal totalmente adequado ao uso humano. Todos os seus componentes são de uso medicinal presentes em alguns adesivos, garantindo a não presença de substâncias nocivas à saúde (BPA, Látex, PVC), que de maneira alguma deve ser industrial.

O tecido utilizado tem como característica inibir a cultura de bactérias, repele todos os tipos de líquidos, não encharca, diminuindo assim, a colonização de bactérias. Nosso adesivo é medicinal e hipoalergênico. TNT é mais macio e confortável.

Com o **MEDFIX® ORO**, você está optando na segurança e conforto que o produto deve oferecer aos seus pacientes.



Produto livre de Bisfenol A,  
Ftalatos, Latex, Chumbo e PVC

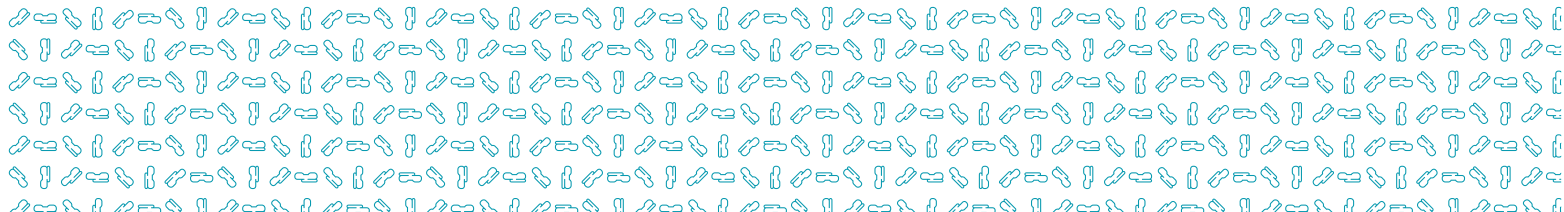



### O MEDFIX<sup>®</sup> ORO - Médio e MEDIFIX<sup>®</sup> ORO Pequeno

Fixador de Cânula Orotraqueal, é um dispositivo para a fixação e estabilização do tubo orotraqueal COM REGULAGEM para proporcionar ao profissional que estiver aplicando uma ajustagem fina no entorno do paciente para uma perfeita e segura fixação e estabilização do tubo orotraqueal.

Sendo então, composto de Tecido não tecido laminado de Polipropileno, Fita dupla face com liner de papel glassine pardo (120 g/m<sup>2</sup>), dorso de espuma de Polietileno e adesivo borracha em uma face e acrílico Hipoalergênico na outra, Fita dupla face com duplo liner de papel glassine branco (60 g/m<sup>2</sup>), dorso de filme de polipropileno e adesivo acrílico em ambos os lados, Velcro de polipropileno ajustável, para fixação da cânula orotraqueal, lacrado de forma inviolável contendo 01 unidade.



Comercializado nos tamanhos:

Médio: Ref.: 102-140 e Pequeno: Ref. 102-240

Patente Requerida: MU 8601030-1



Fabricado e Distribuído por: Cirúrgica Copacabana 2000 Eireli  
Reg. MS / ANVISA: 80327110002  
Rua Conde de Porto Alegre, 57 - Térreo, Rocha - Rio de Janeiro / RJ  
CEP: 20960-110 / TEL: (21) 2548-5668  
SAC: sac@cirurgicaindustrial.com.br  
CNPJ: 02.340.772/0001-06

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Paula de Oliveira Arruda - COREN - RJ: 449094 - ENF

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

