


Tubo Tappa Bloqueador Endoblock

Auto inflador



Estrutura »

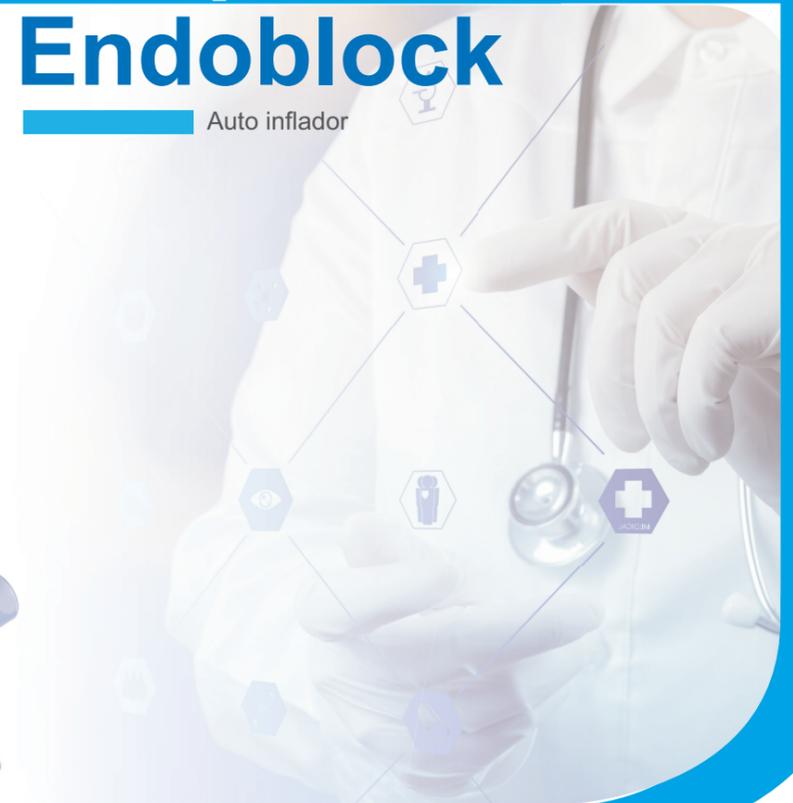

Junta de transição »



Características do Produto: »

- Dispositivo único de auto-insuflação que permite que o profissional insufe o cuff somente com uma das mãos.
- Atende as necessidades de isolamento de um dos pulmões em pacientes de diferentes idades.
- Sealed fiber bronchoscope port for insertion into a fiber bronchoscope or suction tube.
- Montagem confiável do tubo endotraqueal evitando a oclusão ou desposicionamento do mesmo durante o procedimento.
- Desenho flexível e fino do tubo principal para ajustar a posição e o direcionamento do bloqueador conforme a necessidade.
- Desenho inovador da Tappa de acordo com a anatomia fisiológica Humana facilitando a intubação.
- High volume low pressure silicone cuff to reduce bronchial mucosal irritation and damage.
- Utilizado junto com o tubo endotraqueal para evitar danos secundários causados pela substituição do tubo.

